

介護保険
レンタル
適用商品

介護者の腰痛防止に!(中小企業労働環境向上助成金【介護福祉機器等助成】対象機器)

SKYLIFT

スカイリフト SL-2009U PAT No.3731001

¥480,000 (非課税)

JANコード 4560232694119
TAISコード 00149-000006


サイズ/幅50×高さ135.7×奥行96cm
重量/37kg(耐荷重100kg)
材質/本体:スチール製

※バッテリー内蔵型(家庭用AC100Vで充電)
※モデルが装着している各種
スリングシートは別売です。(裏面参照)

毎日立つことができれば 何かが変わる。 スタンディングリフト の決定版。

適応条件

- ◆身長/体重
145cm~175cm/100kg未満
- ◆身体機能
・ベッドに自力または一部介助で端座位が可能の方
・座位から立つまでの下肢関節の可動域がある程度保たれている方
・片麻痺、両下肢麻痺、四肢麻痺があっても、下肢に体重をかけることが可能な方

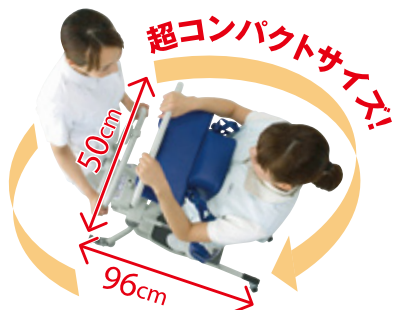

座位から立位に、そして座位に
簡単な操作で移乗をサポート

※スカイリフトは、(財)テクノイド協会の助成を受けて開発されました。



ベッド⇄車いすの移乗に
負担なく毎日の移乗介助ができます



トイレでの排泄ケアを可能に
洋式便器への移乗や衣服着脱が可能に



入浴介助の負担軽減に
シャワーチェアへの移乗も楽に



スタンディングマシーンとして
立つことでリハビリ効果が期待できます



アイ・ソネックス株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7

TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

<http://www.nasent.net>

詳しい使い方は、弊社サイト上の本商品紹介「動画」でわかりやすくご紹介しています。

①カンタン充電

専用アダプターを本体とコンセントに差込むだけ。

②緊急下降ボタン付

とっさの時にも大丈夫。
(④一時停止時もこのボタン動作はできます)

安全・安心を重視した
操作パネル

③スイッチの切り忘れも大丈夫、勝手に電源オフ

操作を止めてから20分後に自動的に電源が切れるので、バッテリーの消耗を防ぎます。




④停止センサー付

胸パッドの下端部が体に触れると自動的に止まります。



⑤膝パッドは調節できます

⑤-A 体格に合わせてワンタッチで、前後に4段階調節ができます。
⑤-B 高さもネジ止めで4段階調節ができます。

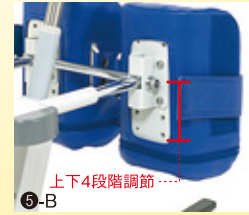

足回りのサイズ



介護保険
購入
適用商品

身体状況や用途に合わせた
3タイプを用意

スカイリフト専用スリングシート

スリングシートは別売りです。本体と同時購入の場合、1枚だけ非課税扱いとなります。

手早く装着できて、衣服の着脱が簡単なので排泄ケアに最適です

エアスリング

AS-201

Mサイズ・Lサイズ

各 ¥35,000 (税別)

JANコード: 4560232694126
TAISコード: 00149-000002



立ち上りの安定と滑りの防止に!
付属品 胸パッド
¥2,000 (税別)

▲エアクッション内蔵

座った姿勢で使えるので初めての方でも安心

サポートスリング

SS-202



Mサイズ・Lサイズ

各 ¥32,000 (税別)

JANコード: 4560232694133
TAISコード: 00149-000003

立位がとれない方の排泄ケアに!
トイレットスリング
TS-204
¥32,000 (税別)

しっかり腰をサポートするのでリハビリ訓練におすすめです



スムーズホルダー

SH-203

¥18,000 (税別)

JANコード: 4560232694140
TAISコード: 00149-000025

エアスリングと併用してください

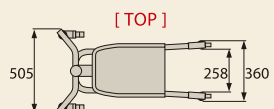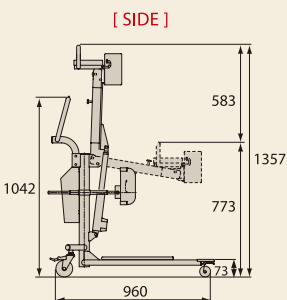

〈寸法図〉mm スカイリフト SL-2009U

昇降アーム最低時(握りバー上端)	773mm
昇降アーム最高時(握りバー上端)	1357mm
ストローク	583mm
操作ハンドル上端	1042mm
走行フレーム高さ(前輪部)	73mm
走行フレーム長さ	960mm
走行フレーム外寸(前輪部)	360mm
走行フレーム外寸(後輪部)	505mm
走行フレーム内寸(前輪部)	258mm

〈適応対象及び留意点〉

- 体重100kg未満/身長145~175cm
- 下肢筋力の低下や麻痺で歩行や立ち上がり動作の困難な高齢者や障害を持った方。
- 長期臥床などによる下肢関節の顕著な変形や拘縮、起立性低血圧などの症状のある方は、必ず医師やリハビリの専門家に相談の上、ご使用ください。

SKYLIFT(スカイリフト)のご用命は

アイ・ソネックス株式会社

http://www.nasent.net

ナーセント

検索

動画配信中!

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7 TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553
品質向上のためお断りなく仕様を変更する場合や商品の実際の色が印刷色と若干異なる場合がございます。恐れ入りますが予めご了承ください。